



ÚJ GENERÁCIÓS VISZKOELASZTIKUS POCT MÓDSZER



A HEMOSZTÁZIS ÁTFOGÓ ELLENŐRZÉSÉRE

A ClotPro nagy teljesítményű

Átfogó lehetőségeket nyújt a teljes véralvadás vizsgálatához.

Az eredmények közlése az érvényes hagyományos tromboticitaelasztometriai paraméterekkel történik.

A ClotPro hatékony

Csak a kívánt tesztek kell végrehajtania (és megvásárolnia).

Hat független csatorna a nagyobb teljesítmény és rugalmasság érdekében.

Rendkívül gyors (< 3 perc az első eredményig).

A ClotPro felhasználóbarát

Az aktív pipettahegy technológia szükségtelemmé teszi a külön reagenshasználatot.


A felhasználó általi adatbevitelt érintőképernyő, vonalkód leolvasó, billentyűzet és egér segíti.

E-mailen és azonnali üzenetekben továbbítható teszteredmények.

LIS csatlakoztathatóság. Teszteredmények távoli elérése.



AZ OKOS VÁLASZTÁS A VISZKOELASZTIKUS TESZTELÉSHEZ

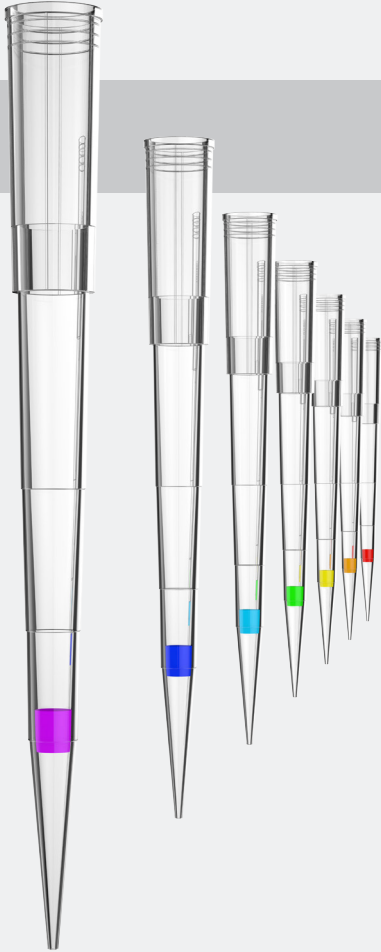

PARAMÉTEREK

- EX-teszt** A koagulációs folyamat gyors áttekintése.
(Az extrinsic út monitorozása)
- FIB-teszt** Funkcionális-fibrinogén érzékelés.
(Az extrinsic út monitorozása trombociták nélkül)
- AP-teszt** Fibrinolízis gátlás, ami elősegíti a hiperfibrinolízis észlelését (az EX-teszttel együtt).
(Extrinsic út vizsgálata antifibrinolitikum jelenlétben)
- IN-teszt** Belső, heparinra és a véralvadási faktorokra (pl. FVIII) érzékeny szűrőteszt. (Intrinsic út monitorozása)
- HI-teszt** Heparin semlegítéssel dolgozó IN-teszt a fennmaradó véralvadási aktivitás meghatározásához.
- TPA-teszt** Fibrinolízis aktiválása az antifibrinolitikus terápiák észleléséhez.
- RVV-teszt** DOAC gyógyszerek (pl. rivaroxaban) szűrésére szolgáló teszt.
- ECA-teszt** Direkt trombocitagátlók szűrésére szolgáló teszt.

KÉSZÜLÉK

Tesztcsatornák száma	6
Méreték (készülék)	48cm x 20cm x 8cm (SzéxMéxMa)
Mintatérfogat	340 µl citrátos vér tesztenként



© 2018 Enicor GmbH. Minden jog fenntartva Valamennyi említett védjegy jogi védelem alatt áll.

DiaCare
SOLUTION

Forgalmazó:

DiaCare Solution Kft.
info@diacaresolution.com
www.diacaresolution.com